

The logo for truBody, featuring the brand name in a white sans-serif font with a small red square icon to the left of the 't'.

truBody®

YAĞLARI PARÇALA KASLARI ŞEKİLLENDİR

Hastalarınızı en iyi hallerinin daha da ötesine taşıyın

Model. Not actual patient.

Estetiğin Muhteşem İkilisi

truBody, günümüzün talep gören tedavilerine hitap eden özelleştirilmiş, kullanışlı ve eksiksiz bir çözüm sunmak için iki ödüllü teknolojiyi bir araya getiriyor: truSculpt® ile yağları parçalamak ve truFlex™ ile kasları şekillendirmek.¹⁻³



ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Başlık yerleşimi, tedavi süresi, patern ve yoğunluk parametrelerini ayarlayarak hastaları hedeflerinin ötesine taşıyın^{1,2}

Hem büyük hem de küçük alanları hedefleyin^{1,2}

Kasları seçici olarak hedefleyin^{1,2}

Her türlü vücut ve cilt tipindeki ve fitness seviyesindeki hastaları tedavi etmek için onay almıştır^{1,2}

ELVERİŞLİ

En hızlı yağ parçalama tedavilerinden biridir; sadece **30 dakika^{1,2,4}** gibi kısa bir sürede tam vücut şekillendirme tedavisi

Devredilebilir, eller serbest tedavi*

Downtime yoktur^{1,2,5}

Aynı anda **8 bölgeye** kadar tedavi edebilir^{1,2}

EKSİKSİZ

Tek bir seansta yağları parçalayın^{1,2}

Tedavi alanı başına ortalama **%24 yağ azaltın⁶**

Kas kütlelerini **%30'a kadar** kadar arttırın⁷

Bir tedavi seansıyla sonuç alın^{6,7}

*Ülkenin kanun düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterir

truSculpt


Yağları parçalayın

truSculpt monopolar radyofrekans (RF) ile karın ve bögürdeki istenmeyen yağları azaltan invaziv olmayan bir tedavidir.¹




2 MHz monopolar RF

Cutera'ya özel, düşük frekanslı uniform enerji subkutan yağ tabakasını tedavi etmek için derinlere nüfuz eder.¹

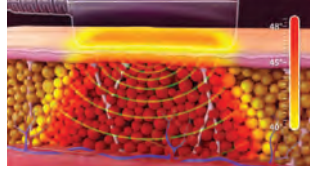

Gerçek zamanlı sıcaklık kontrolü

Cilt sıcaklığı rahatsızlık hissi yaratmayacak 43-45 santigrat derece aralığında tutulurken ve subkutan doku tedavi edici 46-48 santigrat dereceye ulaşınca kadar sürekli ısıtılırken, RF enerjisi sürekli izlenir ve ihtiyaca göre ayarlanır.¹

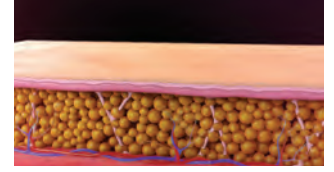

15 dakikalık tek bir tedavi seansından sonra

Hasarlanmış yağ hücreleri yavaşça parçalanır ve lenfatik sistem tarafından 12 haftalık bir süre içerisinde tedavi bölgesinden atılır.¹¹

truFlex

Kasları şekillendirin

truFlex karın ve oblik kasları, kalça ve uyluk kaslarını güçlendirmek, kas tonusunu geliştirmek ve kasları belirginleştirmek amacıyla kullanılan çok yönde stimülasyon (MDS) özelliğine sahip kişiye özel ayarlanabilir kas uyarma cihazıdır.² Bu cihaz 54 bin adet crunch yapmaya denk gelen kas kontraksiyonları oluşturarak 5 farklı egzersizi taklit eder.^{4,12}




Mod 1: Hazırlık

Kasları ısıtmak, esnetmek ve kas kasılmalarına karşı yavaşça tolerans oluşturmak için kaslara twist hareketi yaptırır.²



Mod 2: Tone

Kaslar kasılır, tükenme noktasına kadar kasılı tutulur ve ardından gevşetilerek kas gücü ve dayanıklılığını artırır.²

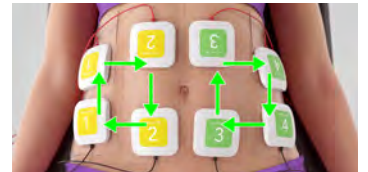

Mod 3: Sculpt

Kaslara hızlı, derin ve ardışık kasılmalar yaptırarak kas kütlesini artırır.²

HASTALARINIZA EN İYİ SONUÇLARI SUNUN YATIRIMINIZIN GETİRİSİNİ



YOĞUN HASTA
SİRKÜLASYONU
POTANSİYELİ



YATIRIMIN ÇOK İYİ
GERİ DÖNÜŞ ORANI



DÜŞÜK MALİYETLİ
SARFLAR



HIZLI TEDAVİ
SEANSLARI^{1,2}



HERŞEY DAHİL EKİPMAN =
DAHA FAZLA SAYIDA HASTA

Bu seviyede kişiselleştirilebilen tek vücut şekillendirme çözümüyle hastalarınızın gerçek potansiyellerini ortaya çıkarın.

Daha fazla bilgil için att.com.tr ziyaret edin.



5x Son 8 yılda vücut şekillendirmeye olan talepteki artış⁸

Ve tedavilerin revaçta olması bu hızlı yükselmenin devam etmesini sağlıyor³

%58 cerrahi olmayan yağ azaltımı tedavilerindeki artış oranı³

%42 kas sıkılaştırma/şekillendirme tedavilerindeki artış oranı³



GERÇEK SONUÇLAR

Bu hızla büyüyen pazara girin ve yüksek hasta memnuniyeti sağlayan sonuçlar elde edin

Öncesi

Sonrası



1 truSculpt tedavisi ve 4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR DR. JEFFREY FROMOWITZ'IN İZNİYLE

Öncesi

Sonrası



1 truSculpt tedavisi ve 4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR DR. TAHL HUMES'IN İZNİYLE

Öncesi

Sonrası



1 truSculpt tedavisi ve 4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR DR. MIRA KAGA'NIN İZNİYLE

Öncesi

Sonrası



1 truSculpt tedavisi ve 4 truFlex tedavisi

FOTOĞRAFLAR SUN SCULPT BODY CONTOURING'NIN İZNİYLE

%100

hasta memnuniyeti
tedaviden hemen sonrar⁹

%92

hasta memnuniyeti
tedaviden 8 hafta sonra¹⁰



truSculpt

Teknoloji	Monopolar Radyofrekans (RF)
Çalışma Frekansı	1 MHz / 2 MHz
Cihaz Boyutları	36 cm G x 45 cm U x 106 cm Y
Cihaz Ağırlığı	39 kg
Cihazın Elektrik Gereksinimleri	Voltaj: 100 VAC-240 VAC 50/60 Hz Güç: 2000 VA



truFlex

Teknoloji	Elektrikle Doğrudan Kas Uyarımı
Çalışma Frekansı	4000 Hz
Cihaz Boyutları	36 cm G x 45 cm U x 102 cm Y
Cihaz Ağırlığı	33 kg
Cihazın Elektrik Gereksinimleri	Voltaj: 100-240 VAC @ 50/60 Hz Güç: 75 VA

TRUSCULPT/TRUFLEX:

Kontrendikasyonlar, dikkat edilmesi gereken hususlar, uyarılar, yan etkiler ve truSculpt/truFlex tedavisiyle alakalı olası istenmeyen etkiler için lütfen cihazların kullanım kılavuzlarını ve tedavi rehberlerini inceleyin.

REFERANSLAR:

1. truSculpt Clinical Guidelines, Cutera, Inc. **2.** truFlex Clinical Guidelines, Cutera, Inc. **3.** The Aesthetic Society. Aesthetic Plastic Surgery National Databank Statistics 2020-2021. Available from <https://cdn.theaestheticsociety.org/media/statistics/2021-TheAestheticSocietyStatistics.pdf>. Accessed Nov. 4, 2022. **4.** Data on File. Cutera Inc. **5.** Jesitus J. truSculpt iD Creates Customized Treatments. *The Aesthetic Guide*. September/October 2018. **6.** Somenek MT, Ronan SJ, Pittman TA. *Lasers Surg Med*. 2021;53(3):337-343. **7.** Ronan SJ. A Novel Bio-Electric Current Stimulation Device For Improvement Of Muscle Tone [white paper, Cutera Inc.]. 7/2019. **8.** American Society for Dermatologic Surgery. Total procedures in 2019. Available from <https://www.asds.net/Portals/0/PDF/procedures-survey-results-infographic-2019.pdf?ver=DbHY7gNS3zVWVOT6IrgHcg%3d%3d>. Accessed Nov. 8, 2022. **9.** Data on File. truSculpt ID Patient Satisfaction Survey. Cutera Inc. **10.** Spring LK, et al. *Dermatol Surg*. 2022;48(3):334-338. **11.** Napekoski KM, Ronan SJ, Pocock GM. Inflammatory and adipocyte cell death response following a single 15-minute monopolar radiofrequency treatment [white paper]. 2018. **12.** Nye R, Hoffmeister A. The process of muscle hypertrophy utilizing a novel bio-electrical muscle stimulation device [white paper, Cutera Inc.]. 1/2020.

CUTERA HAKKINDA

Cutera dünyanın her yerindeki doktorların kullanımı için tasarlanmış lazer ve diğer enerji tabanlı estetik cihazların önde gelen üreticilerinden birisidir. 1998'den beri, Cutera doktorların ve diğer yetkin uygulayıcıların hastalarına güvenli ve etkin estetik tedaviler sunabilmesi için yenilikçi, kullanımı kolay cihazlar geliştirmektedir.

Cutera, Inc. Global Merkez Ofisi
3240 Bayshore Boulevard, Brisbane, California 94005 USA
888-4-CUTERA or 415-657-5500 | info@cutera.com | cutera.com

©2023 Cutera, Inc. All rights reserved. AP003850 rA (1/23)

CUTERA®
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

truBody®

truSculpt®
truFlex®